

Informações Gerais de Identificação do Produto

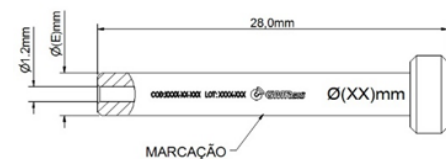
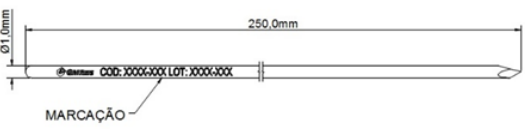
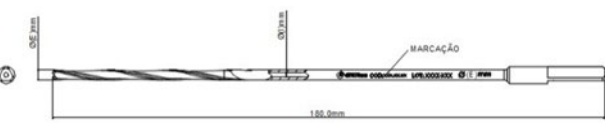
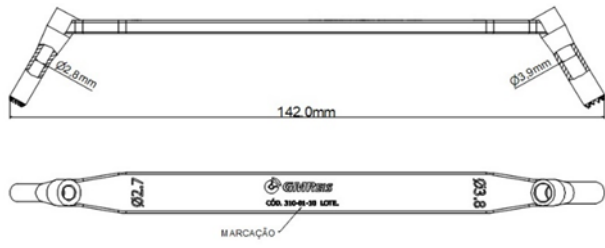
Produto não implantável, instrumental reutilizável, fornecido não estéril – esterilizar antes do uso conforme método de esterilização recomendado.

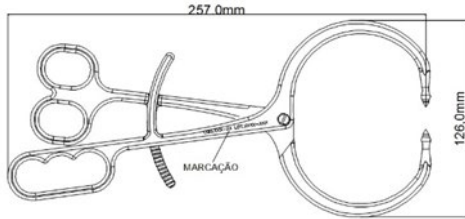
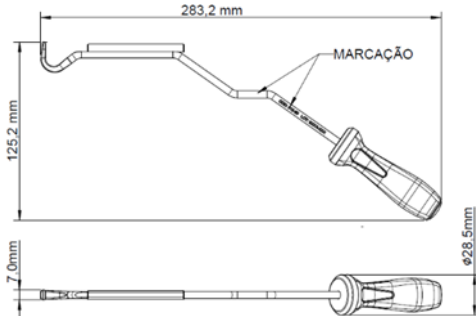
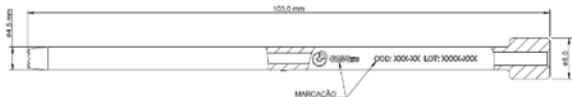
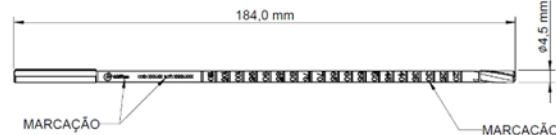
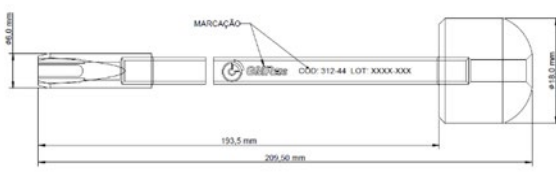
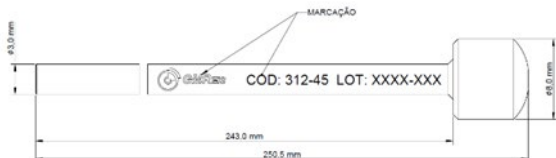
Não são objeto deste registro os componentes implantáveis.

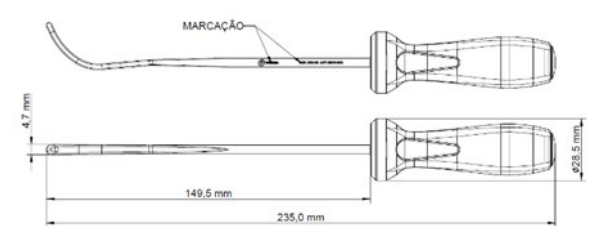
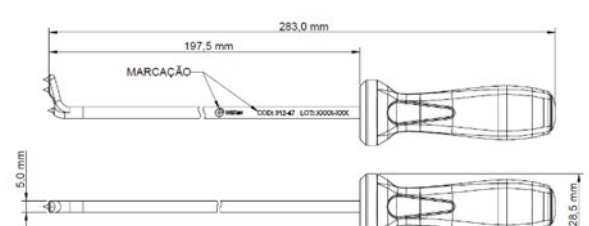
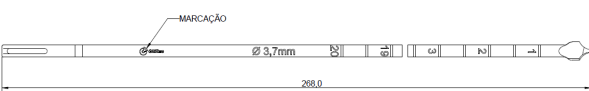
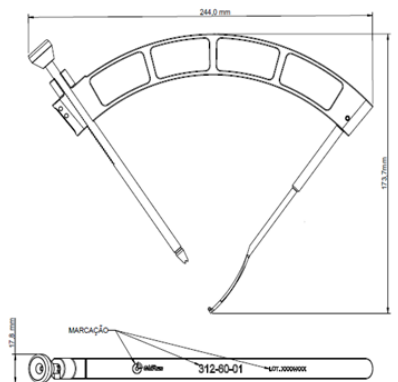
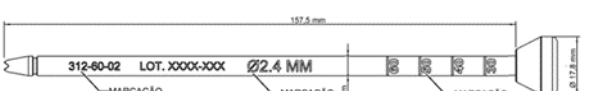
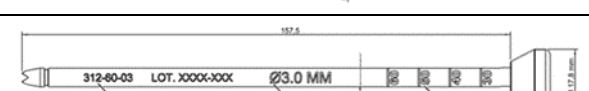
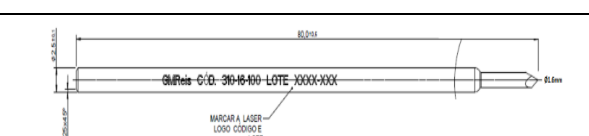
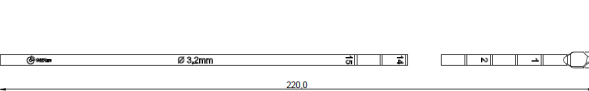
Nome Técnico: Instrumental para Implante Ortopédico

Nome Comercial: Instrumentais EXPERT

Tabela 01 - Relação dos Instrumentais

TABELA 01: INSTRUMENTAIS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÕES	MATÉRIA PRIMA EM CONTATO COM O PACIENTE	IMAGENS GRÁFICAS
310-01-05	Guia do Fio Ø1mm - Broca Ø3,8mm	Ø3,5mmx28mm	Aço Inox - ASTM F899	
310-01-11	Guia do Fio Ø1mm - Broca Ø2,7mm	Ø2,4mmx28mm		
310-01-07	Fio Guia Ø 1,0 x 250,0 mm	Ø1mmx250mm	Aço Inox ASTM F138 /NBR ISO 5832-1	
311-01-06	Broca Ø 2,7 / 1,2 mm x 180,0 mm	Ø2,7/1,2mmx180mm	Aço Inox - ASTM F899	
310-01-08	Broca Ø 3,8 / 1,2 mm x 180,0 mm	Ø3,8/1,2mmx180mm		
310-01-08-S	Broca Ø 3,8 x 180,0 mm	Ø3,8mmx180mm		
310-01-10	Protetor de Partes Moles Ø2,7mm/Ø3,8mm	Ø2,8mm/Ø3,9mmx142mm	Aço Inox - ASTM F899	
311-16	Fio de Nitinol Passador de Sutura com Loop Ø 0,7 x 203 mm	Ø0,7mmx203mm	Aço Inox ASTM F138 NITINOL ASTM F2063	

314-100	Pinça para Sindesmose	257mmx126mm	Aço Inox - ASTM F899	
310-25-280	TUBO PROTETOR EXPERT	280xdE2.5xdl1.65mm	POLIPROPILENO NORMA NBR ISO 16061	
312-40	GUIA EXPERT AC	125,2 x 283,2mm	Aço Inox - ASTM F899 AÇO INOX - NBR 5601/ SILICONE GRAU CIRÚRGICO	
312-41	CÂNULA EXPERT AC	103,0 x d4,5mm	AÇO INOX NBR 5601	
312-42	FIO GUIA EXPERT AC	320,0 x d2,0mm	AÇO INOX ASTM F138 NBR ISO 5832-1	
312-43	BROCA EXPERT AC	184,0 x d4,5mm	Aço Inox - ASTM F899	
312-44	INTRODUTOR EXPERT AC	209,5 x d6,0mm	AÇO INOX NBR 5601	
312-45	EMPURRADOR EXPERT AC	250,5 x d3,0mm	AÇO INOX ASTM F899 NBR ISO 5832-1 / AÇO INOX NBR 5601	

312-46	PASSADOR DE SUTURA EXPERT AC	235,0 x d4,7mm	AÇO INOX ASTM F899 NBR ISO 5832-1 / SILICONE NBR 16061	
312-47	REPOSICIONADOR EXPERT AC	283,0 x d5,0mm	AÇO INOX ASTM F899 NBR ISO 5832-1 / AÇO INOX NBR 5601 / SILICONE NBR 16061	
312-49	BROCA GRADUADA COM ILHÓS Ø3,7 X 268,0mm	268,0 x d3,7mm	Aço Inox - ASTM F899	
312-60-01	GUIA ACROMIO-CLAVICULAR	173,7 x 229,2mm	Aço Inox ASTM F899	
312-60-02	CÂNULA GRADUADA - Ø 2,4mm	157,5 X 2,4mm	Aço Inox ASTM F899	
312-60-03	CÂNULA GRADUADA - Ø 3,0mm	157,5 X 3,0mm		
310-16-100	FIO GUIA - Ø1,6x80,0mm	Ø1,6x80,0mm	Aço Inox ASTM F899	
312-32	BROCA GRADUADA Ø3,2x220,0mm	Ø3,2x220,0mm	Aço Inox ASTM F899	



INSTRUÇÃO DE USO

Instrumentais EXPERT

INST EXPERT

Folha:

4 de 10

Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo e/ou composição

Os Instrumentais EXPERT trata-se de instrumentais de uso específico para procedimentos cirúrgicos de fixação de articulação.

Forma de apresentação

Os Instrumentais Expert são fornecidos não estéreis, devidamente identificados, isto é, marcados a laser com seu código, número de lote e logomarca da GMReis. Tem como forma de apresentação comercial o acondicionamento dos instrumentais em caixa específica, embalada em plástico de polietileno/poliéster e rotulada. Os instrumentais são embalados individualmente. O conjunto de Instrumentais Expert é composto de 1 unidade de cada item. Em caso de reposição, os itens do conjunto poderão ser vendidos separadamente. Acompanha o produto um manual de como o usuário pode obter as Instruções de Uso do produto, por meio do formato não impresso, sem custo adicional, inclusive de envio. Essas informações estão compatibilizadas na rotulagem do produto.

Especificação técnica da embalagem: Embalagem plástica em polietileno/poliéster (estrutura tubular ou envelope).

Princípio físico e fundamentos da sua tecnologia e sua ação

Os Instrumentais EXPERT são instrumentais cirúrgicos especialmente projetados para assistir o cirurgião em procedimentos cirúrgicos para tratamentos de ortopedia e traumatologia de fixação de articulação.

Trata-se de produtos reutilizáveis e reesterilizáveis.

Estes instrumentais têm funções tais como: guiar, perfurar ossos, proteger partes moles e facilitar passagem.

Composição dos materiais de fabricação dos instrumentais

Os instrumentais EXPERT podem ser fabricados com diferentes matérias-primas que são selecionadas conforme a função do instrumental.

<i>Aço Inox - ASTM F 899</i>
<i>Aço Inox - ASTM F138/NBR ISO 5832-1</i>
<i>Nitinol – ASTM F2063</i>
<i>PPSU/PPSU Raw – ISO 16061</i>
<i>Polipropileno – NBR ISO 16061</i>
<i>Silicone – ISO 16061</i>

Identificação

Os produtos são marcados a laser com as seguintes informações:

- Lote do produto
- Código do produto
- Logotipo da marca GMReis
- Tamanho (quando aplicável)

A identificação do produto é assegurada através da Instrução de Uso, trazendo informações sobre o produto, como: nome, modelo, código, lote, registro do produto e identificação do fabricante.

PORTUGUÊS (PT)	ENGLISH (EN)	ESPAÑOL (ES)	
A Instrução de Uso para este produto está disponível no website www.gmreis.com.br/produtos/IFU , (formato não impresso) e sempre estará de acordo com a última versão vigente, aprovada pela Anvisa	The Instruction for USE (IFU) for this product is available on the website: www.gmreis.com.br/produtos/IFU (printed format) and will always be in accordance with the latest version, approved by Anvisa	La Instrucción de Uso para este producto está disponible en el sitio web: www.gmreis.com.br/produtos/IFU (formato impreso) y siempre será con arreglo a la última versión en vigor, aprobado por la Anvisa	
No campo de busca, procure pelo nº do Registro da Anvisa do Produto ou nome comercial, descrito no rótulo, na embalagem do produto. Para visualização do documento é preciso ter o Adobe Reader. Obtenha gratuitamente no website acima.	In the search field, look for ANVISA registration number or commercial name, described on label in the product packaging. In order to view the document, you must have Adobe Reader, which can be downloaded for free from the website above.	En el campo de búsqueda, busque por el número Registro ANVISA del producto o nombre comercial, descrito en la etiqueta del envase de producto. Para visualizar el documento es necesario tener el Adobe Reader. Reciba gratis en el sitio web arriba.	PT - Guia para acesso das Instruções de Uso GMReis (IFU)
Caso necessite receber uma versão impressa da IU, sem custo adicional, inclusive de envio, solicite gratuitamente pelo e-mail: sac@gmreis.com.br ou telefone disponível na rotulagem	If you need a printed copy at no extra cost, including shipping, please contact the e-mail: sac@gmreis.com.br or phone number available on labelling	Caso necesite recibir una versión impresa de IFU, sin costo adicional, incluyendo el envío, solicite gratis por el correo electrónico: sac@gmreis.com.br o teléfono disponible en el etiquetad	EN - GMReis Instructions for Use (IFU) access guide ES - Guía para acceder a las instrucciones de uso (IFU) IFUGMREIS – Rev.01

Figura: Manual que acompanha o produto.

Armazenamento, conservação, manipulação e transporte e riscos associados

O produto deve ser manipulado, conservado, armazenado e transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração às suas características e embalagem.

O produto médico deve ser manipulado com todo cuidado, de maneira a evitar choques bruscos, quedas e outros riscos e/ou imperfeições que afetem a qualidade do mesmo e a segurança do usuário.

Deve ser conservado e armazenado em sua embalagem original, até o momento do seu uso, em ambiente limpo, seco, arejado, protegido da luz solar, livre de substâncias contaminantes (vapores ácidos e orgânicos), e com controle de temperatura e umidade.

O manuseio e armazenamento do produto devem ser feitos exclusivamente por profissionais da área médico-hospitalar, devidamente capacitados, habilitados e familiarizados com a técnica e os procedimentos envolvidos.

Os efeitos de vibração, choques, assentamento defeituoso, empilhamentos inadequados e temperatura acima de 45 °C durante o transporte, devem ser evitados.

O armazenamento, manuseio, conservação e transporte do produto fora das condições especificadas, podem gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

Instruções para o uso do produto

Os Instrumentais EXPERT deverão ser utilizados conforme técnicas cirúrgicas específicas adotadas por profissional devidamente capacitado e habilitado em procedimentos de fixação de articulação.

Os instrumentais são utilizados por cirurgião cuja técnica cirúrgica a ser adotada por ele faz parte de sua formação profissional.



INSTRUÇÃO DE USO

Instrumentais EXPERT

INST EXPERT

Folha:

6 de 10

Os instrumentais são variáveis quanto a forma e dimensões, sendo de responsabilidade do profissional responsável pelo procedimento, a decisão de onde e como utilizar os instrumentais, bem como decidir quanto ao tipo, forma e dimensões.

Estes produtos podem ser reutilizados, mas não devem ser curvados ou modelados de nenhuma forma.

Precauções, restrições, advertências e cuidados especiais e esclarecimento sobre o uso do produto, assim como seu armazenamento e transporte

Produto reutilizável, não estéril, efetuar procedimentos pré-utilização e enviar para esterilizar antes do uso.

Os Instrumentais EXPERT deverão ser utilizados conforme técnicas cirúrgicas específicas adotadas por profissional devidamente capacitado e habilitado em procedimentos de fixação de articulação.

Deve ser tomado extremo cuidado para assegurar que o instrumento cirúrgico permaneça em boas condições de trabalho. Quaisquer técnicas cirúrgicas aplicáveis para o uso deste sistema devem ser cuidadosamente seguidas. Durante o procedimento, é extremamente importante a utilização correta do instrumento cirúrgico. Este instrumento pode ser reutilizado, mas não deve ser curvado ou danificado de nenhuma forma. A má utilização do instrumento cirúrgico pode causar corrosão, desapertos, curvamentos e/ou fratura de qualquer uma ou de todas as seções do instrumento cirúrgico, podendo inibir seu funcionamento adequado.

Não use este instrumento para qualquer ação para qual ele não foi projetado como alavancar, levantar pesos, etc. Os instrumentais cirúrgicos devem ser tratados como qualquer instrumento de precisão e devem ser cuidadosamente acondicionados em bacias cirúrgicas, limpos depois de cada uso, e armazenados em ambiente seco e livre de intempéries.

Apenas instrumentos estéreis devem ser utilizados em cirurgia. Os instrumentos cirúrgicos devem ser completamente limpos, secos e desinfetados com agentes próprios antes da reesterilização.

O uso impróprio de instrumentais cirúrgicos bem como a utilização de instrumentais cirúrgicos danificados pode causar lesão ou dano ao paciente ou ao pessoal da sala cirúrgica, por exemplo, a utilização incorreta pode causar quebra e penetração de pedaços ou componentes no paciente ou em alguém que esteja por perto. Se for danificado, não reutilize, substitua-o.

Os cuidados na distribuição, estocagem, transporte, limpeza, armazenamento, conservação e rastreabilidade devem seguir as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos, estão conforme resolução vigente. Os instrumentais cirúrgicos deverão ser armazenados em local seco, arejado, limpo, livre da ação de intempéries, e em temperatura ambiente.

Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto

Os Instrumentais EXPERT tratam-se de instrumentais de uso específico para procedimentos de fixação de articulação.



INSTRUÇÃO DE USO

Instrumentais EXPERT

INST EXPERT

Folha:

7 de 10

Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contraindicações

Não se aplica.

Contraindicações

O uso dos Instrumentais EXPERT é contraindicado para qualquer procedimento cirúrgico que não seja para aplicação em cirurgia de fixação de articulação.

Informações detalhadas das características de todas as partes, acessórios e materiais destinados a serem utilizados com o produto

Combinações admissíveis com outros componentes implantáveis

Os Instrumentais EXPERT só devem ser utilizados para procedimentos de fixação de articulação de pé, mão e tornozelo. Caso qualquer outro instrumental cirúrgico seja utilizado em conjunto aos que compõe o Instrumental EXPERT, poderão ser gerados riscos ao paciente e/ou procedimento, sendo a responsabilidade do profissional responsável pelo procedimento cirúrgico.

Informações que possibilitam comprovar se a implantação foi correta e segura, assim como as informações relativas à natureza e frequência das avaliações a serem realizadas de forma a garantir o permanente bom funcionamento e segurança do produto

Após a limpeza e desinfecção realizadas após o uso, todos os instrumentais do Instrumentais EXPERT devem ser submetidos a uma inspeção técnica para garantir que seu funcionamento está apropriado. Caso o produto inspecionado esteja não conforme, isto é, não se apresente nas condições de perfeito funcionamento, deve-se tomar a ação corretiva de remoção e reposição do produto não-conforme por outro da marca GMReis com as mesmas características e função.

Informações adicionais sobre os procedimentos apropriados para a reutilização

Os instrumentais cirúrgicos são produtos reutilizáveis e reesterilizáveis. Antes de enviar para a esterilização conforme descrito no item Método de Esterilização, seguir as instruções de limpeza, desinfecção, acondicionamento e inspeção técnica descritos nos itens a seguir, a fim de se garantir a segurança na sua reutilização.

Não há restrições quanto ao número possível de reutilizações, desde que o produto esteja em perfeitas condições e tenha sido submetido à inspeção técnica.



INSTRUÇÃO DE USO

Instrumentais EXPERT

INST EXPERT

Folha:

8 de 10

Método de esterilização

Os instrumentais cirúrgicos do Instrumentais EXPERT devem ser esterilizados conforme método descrito na especificação abaixo:

Método: vapor

Ciclo: gravitacional

Temperatura: 121°C (250°F)

Tempo de exposição: 30 minutos

Informações adicionais referentes à esterilização estão descritas na norma ABNT NBR ISO 17665-1.

Acondicionamento – Montagem final

Após a inspeção técnica, os instrumentais cirúrgicos devem ser acondicionados e montados em bandejas e caixas cirúrgicas específicas, para então serem enviados para a esterilização conforme Método de Esterilização descrito.

Inutilização e descarte

Os instrumentais cirúrgicos do Instrumentais EXPERT não-conformes, ou que estejam fora de condições de uso, devem ser segregados, descartados e substituídos por outros da marca GMReis que tenham as mesmas características e função. Todos os instrumentais cirúrgicos descartados devem ser inutilizados com retorcedores ou moldadores para evitar utilização futura indevida.

Depois de inutilizado, o produto deverá ser descartado conforme procedimento da área médico-hospitalar ou legislação regional ou conforme Instruções da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.

Restrições referentes à ocorrência de queda do produto

Caso ocorra queda do produto, o produto deverá ser retornado para a GMReis.

Advertência referente a danos da embalagem original

Caso a embalagem original do produto apresente-se danificada ou violada, o produto deverá ser retornado para a GMReis e não deverá ser utilizado.

Orientações específicas ao médico referente ao relato de eventos adversos e queixas técnicas

Caso o produto apresente eventos adversos não relatados na instrução de uso ou tenha queixas técnicas sobre o produto, o médico deverá entrar imediatamente em contato com o fabricante através do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da GMReis, além de notificar a autoridade sanitária competente, ANVISA, através do e-mail: tecnovigilancia@anvisa.gov.br. Maiores informações podem ser encontradas no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA (<http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>).

Para assegurar a rastreabilidade do produto, o médico deverá prosseguir conforme o “procedimento de rastreabilidade do produto”. A rastreabilidade do produto é assegurada através das 05 etiquetas de

rastreabilidade, fornecidas dentro da embalagem, juntamente com a Instrução de Uso, conforme descrito no item “Procedimento de Rastreabilidade do Produto”.

Reclamação do Cliente

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notificar diretamente o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da GM Reis. O produto deverá ser encaminhado limpo e embalado em saco plástico, devidamente identificado e com a descrição da não-conformidade para o seguinte endereço: **Av. Pierre Simon de Laplace, 600 – Lote 3 – Quadra F – Quarteirão 9677 – CEP 13069-320 – Condomínio Technopark - Campinas, SP, Brasil** ou notificar diretamente no **Tel.: (0XX19) 3283-9020 / E-mail: sac@gmreis.com.br**.

Simbologia da Rotulagem

Os símbolos gráficos utilizados na rotulagem estão de acordo com a Norma ABNT NBR ISO 15223-1 conforme segue:

SÍMBOLOS	DESCRIÇÕES	SÍMBOLOS	DESCRIÇÕES
	Data de Fabricação		Cuidado
	Fabricante		Código de Remessa
	Usar até a data		Proteger de luz solar
	Manter seco		Consultar as instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso

ALERTA AO USUARIO

Estas Instruções de Uso são disponibilizadas em formato não impresso, através do endereço eletrônico do fabricante: <http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU>, e podem ser verificadas no campo de busca pelo nome comercial e número de registro na Anvisa, descritos no rótulo da embalagem do produto. As Instruções de Uso disponibilizadas sempre estarão de acordo com a última versão vigente. Caso haja interesse do usuário, as Instruções de Uso poderão ser disponibilizadas em formato impresso, sem custo adicional. Solicite gratuitamente pelo e-mail: sac@gmreis.com.br.



INSTRUÇÃO DE USO

Instrumentais EXPERT

INST EXPERT

Folha:

10 de 10

Avenida Pierre Simon de Laplace, nº 600 - Lote 3 - Quadra F - Quarteirão 9677

Bairro TECHNOPARK - CEP: 13069-320 – Campinas – SP - BRASIL

Autorização de Funcionamento – AFE nº 1.02.477 - 0

C.N.P.J/M.F: 60.040.599/0001-19 / I.E: 244.342.283.119

E-mail: gmreis@gmreis.com.br

Tel.: (0XX19) 3765-9900

Registro Anvisa: 10247700125

Responsável Técnico e Legal Habilitado:

Geraldo Marins dos Reis Júnior

CREA – SP nº 0682127536

Histórico de Revisões

Rev. 00 de 07/01/2019 – Cancelada

Rev. 01 de 17/10/2019 – Alteração por inclusão

Rev. 02 de 03/03/2021 – Alteração por inclusão

Rev. 03 de 20/04/2022 – Alteração por inclusão

Rev. 04 de 10/07/2023 – Alteração por inclusão

Rev. 05 de 26/12/2023 – Alteração por inclusão

Rev. 06 de 21/10/2024 – Alteração por inclusão