

|                                                                                   |                                                                                                             |       |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|
|  | <p align="center"><b>INSTRUCCIONES DE USO</b></p> <p align="center">Ancla en PEEK con Insensor - GMReis</p> |       | <p align="center">IMP ANCPK (ESP)</p> |  |
|                                                                                   |                                                                                                             | Hoja: | 1 de 29                               |  |

### 3. INSTRUCCIONES DE USO

#### 3.1. Información general de identificación del producto

Producto desechable de un solo uso, suministrado estéril mediante óxido de etileno (ETO) de acuerdo con *ISO 11135 - Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*.

Prohibido reutilizar.

Prohibido reprocesar.

Validez del producto: 3 años

#### 3.1.1. Información necesaria para que el usuario identifique el producto y su contenido

**3.1.1.a. Nombre técnico:** Ancla

**3.1.1.b. Nombre comercial:** Ancla en PEEK con Insensor - GMReis

**3.1.1.c. Lista de los componentes implantables que componen el producto, con las informaciones gráficas: diseños técnicos con las respectivas descripciones, características dimensionales, tolerancias, composición con la norma técnica para cada modelo, que permiten visualizar los productos en la forma que se entregarán para consumo, se presentan a continuación:**

## INSTRUCCIONES DE USO

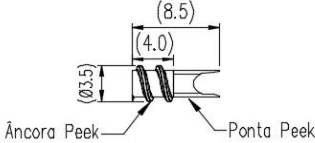
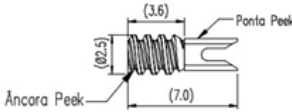
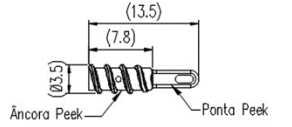
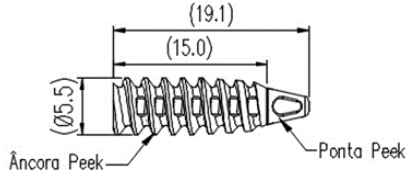
Ancla en PEEK con Insersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

2 de 29

### ANCLOS FASTLOCK

|                         |                                                                                                                                       |                                                                                       |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>320-35085-SA</b>     | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø3.5x4.0/8.5mm DE OJAL ABIERTO CON CINTA AZUL Y BLANCA                                                |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-35085-SA</b>     | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø3.5x4.0/8.5mm DE OJAL ABIERTO CON CINTA 2.0mm AZUL Y BLANCA                                        |                                                                                       |                       |
| <b>320-35485-PB-SA</b>  | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø3.5x4.0/8.5mm DE OJAL ABIERTO CON CINTA 2.0mm BLANCA Y NEGRA                                       |                                                                                       |                       |
| <b>320-25070-SA</b>     | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø2,5x3,6/7,0mm DE OJAL ABIERTO                                                                      |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-35135-SA-PE1</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø3.5x7.8/13.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA AZUL Y BLANCA                                               |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-35135-SA-PE2</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø3.5x7.8/13.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA NEGRA Y BLANCA                                              |                                                                                       |                       |
| <b>320-35135-SA-PE3</b> | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø3.5x7.8/13.5mm DE OJAL CERRADO                                                                     |                                                                                       |                       |
| <b>320-55191-PE1</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y AZUL                                            |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-55191-PE2</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO                                           |                                                                                       |                       |
| <b>320-55191-PE3-A</b>  | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y AZUL Y CINTA NEGRA Y BLANCA AGUJADA 1/2 CÍRCULO |                                                                                       |                       |
| <b>320-55191-PE3</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y AZUL Y CINTA NEGRA Y BLANCA                     |                                                                                       |                       |
| <b>320-55191-PE4-A</b>  | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO Y CINTA AZUL Y BLANCA AGUJADA 1/2 CÍRCULO |                                                                                       |                       |
| <b>320-55191-PE4</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO Y CINTA AZUL Y BLANCA                     |                                                                                       |                       |
| <b>320-55191-PE5</b>    | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø5.5x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO                                          |                                                                                       |                       |
| <b>320-55191-PE6</b>    | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø5.5x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 NEGRO Y BLANCO                                         |                                                                                       |                       |
| <b>320-475191-PE7</b>   | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO                                         |                                                                                       |                       |
| <b>320-475191-PE8</b>   | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 NEGRO Y BLANCO                                        |                                                                                       |                       |

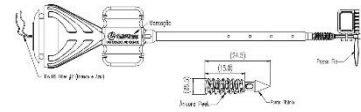
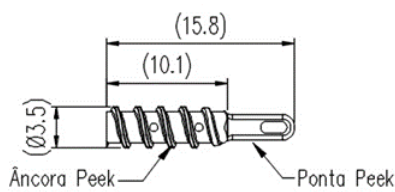
## INSTRUCCIONES DE USO

### Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

3 de 29

|                        |                                                                                                                                     |                                                                                      |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>320-55245-PB1</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI E HILO #2 BLANCO Y AZUL                                          |   | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-55245-PB2</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI E HILO #2 BLANCO Y NEGRO                                         |                                                                                      |                       |
| <b>320-55245-PB3-A</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y AZUL Y CINTA NEGRA Y BLANCA AGUJADA 1/2 CÍRCULO |                                                                                      |                       |
| <b>320-55245-PB3</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y AZUL Y CINTA NEGRA Y BLANCA                     |                                                                                      |                       |
| <b>320-55245-PB4-A</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y NEGRO Y CINTA AZUL Y BLANCA AGUJADA 1/2 CÍRCULO |                                                                                      |                       |
| <b>320-55245-PB4</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø5.5x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y NEGRO Y CINTA AZUL Y BLANCA                     |                                                                                      |                       |
| <b>320-55245-PB5</b>   | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø5.5x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 AZUL Y BLANCO                                          |                                                                                      |                       |
| <b>320-55245-PB6</b>   | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø5.5x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 NEGRO Y BLANCO                                         |                                                                                      |                       |
| <b>320-475245-PB5</b>  | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø4.75x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 AZUL Y BLANCO                                         |                                                                                      |                       |
| <b>320-475245-PB6</b>  | FASTLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø4.75x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y NEGRO                                        |                                                                                      |                       |
| <b>320-351580-PE1</b>  | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø3.5x10.1/15.8mm DE OJAL CERRADO CON CINTA AZUL Y BLANCA                                            |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-351580-PE2</b>  | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø3.5x10.1/15.8mm DE OJAL CERRADO CON CINTA NEGRA Y BLANCA                                           |                                                                                      |                       |
| <b>320-351580-PE3</b>  | FASTLOCK ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø3.5x10.1/15.8mm DE OJAL CERRADO                                                                    |                                                                                      |                       |

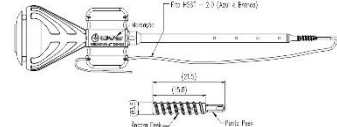
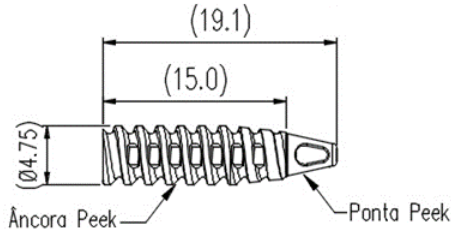
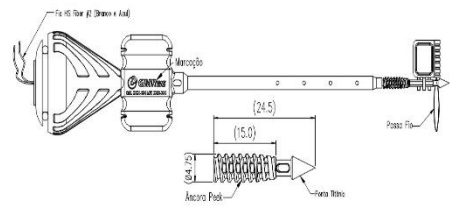
## INSTRUCCIONES DE USO

Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

4 de 29

|                         |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>320-352145-PE1</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø3.5x15.8/21.5mm DE OJAL FEGHADO CON CINTA AZUL Y BLANCA                                               |   | PEEK<br>ASTM<br>F2026                                         |
| <b>320-352145-PE2</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø3.5x15.8/21.5mm DE OJAL CERRADO CON FITA NEGRA Y BLANCA                                               |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-352145-PE3</b>   | FASTLOCK ANCLA EN PEEK SIN NUDO Ø3.5x15.8/21.5mm DE OJAL CERRADO                                                                       |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475191-PE1</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON CINTA NEGRA Y BLANCA                                             |   | PEEK<br>ASTM<br>F2026                                         |
| <b>320-475191-PE2</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y AZUL                                            |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475191-PE3</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO                                           |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475191-PE4-A</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO Y CINTA AZUL Y BLANCA AGUJADA 1/2 CÍRCULO |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475191-PE4</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO Y CINTA AZUL Y BLANCA                     |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475191-PE5-A</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y AZUL Y CINTA NEGRA Y BLANCA AGUJADA 1/2 CÍRCULO |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475191-PE5</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO F AZUL Y CINTA NEGRA Y BLANCA                     |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475191-PE6</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/19.1mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y NEGRO E HILO #2 AZUL Y BLANCO                     |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475245-PB1</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI E HILO #2 BLANCO Y AZUL                                            |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475245-PB2</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI E HILO #2 BLANCO Y NEGRO                                           |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026 /<br>Titânio<br>Ti6Al4V<br>ASTM<br>F136 |
| <b>320-475245-PB3-A</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y NEGRO Y CINTA AZUL Y BLANCA AGUJADA 1/2 CÍRCULO   |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475245-PB3</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y NEGRO Y CINTA AZUL Y BLANCA                       |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475245-PB4-A</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y AZUL Y CINTA NEGRA Y BLANCA AGUJADA 1/2 CÍRCULO   |                                                                                      |                                                               |
| <b>320-475245-PB4</b>   | ANCLA EN PEEK SIN NUDO FASTLOCK Ø4.75x15.0/24.5mm CON PUNTA BALA TI HILO #2 BLANCO Y AZUL Y CINTA NEGRA Y BLANCA                       |                                                                                      |                                                               |

## INSTRUCCIONES DE USO

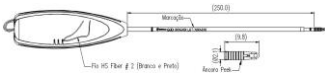
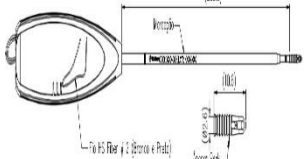
Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

5 de 29

### ANCLAS FITPRESS

|                      |                                                                                                        |                                                                                     |                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>320-21098-1FC</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS CORTA Ø2.1x9.8mm CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO                          |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-21098-2FC</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS CORTA Ø2.1x9.8mm CON HILO #0 BLANCO Y HILO #0 BLANCO Y VERDE         |                                                                                     |                       |
| <b>320-21098-1FM</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS Ø2.1x9.8mm CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO                                |                                                                                     |                       |
| <b>320-21098-2FM</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS Ø2.1x9.8mm CON HILO #0 BLANCO E HILO #0 BLANCO Y VERDE               |                                                                                     |                       |
| <b>320-21098-1FL</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS LARGA Ø2.1x9.8mm CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO                          |                                                                                     |                       |
| <b>320-21098-2FL</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS LARGA Ø2.1x9.8mm CON 2 HILOS #0 BLANCO Y AZUL                        |                                                                                     |                       |
| <b>320-26106-1FC</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS CORTA Ø2.6x10.6mm CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO                         |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-26106-2FC</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS CORTA Ø2.6x10.6mm CON HILO #1 BLANCO Y AZUL E HILO #1 BLANCO         |                                                                                     |                       |
| <b>320-26106-1FM</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS Ø2.6x10.6mm CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO                               |                                                                                     |                       |
| <b>320-26106-2FM</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS Ø2.6x10.6mm CON HILO #1 BLANCO Y AZUL E HILO #1 BLANCO               |                                                                                     |                       |
| <b>320-26106-1FL</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS LARGA Ø2.6x10.6mm CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO                         |                                                                                     |                       |
| <b>320-26106-2FL</b> | ANCLA EN PEEK IMPACTADA FIT PRESS LARGA Ø2.6x10.6mm CON HILO #1 BLANCO Y AZUL E HILO #1 BLANCO Y VERDE |                                                                                     |                       |

## INSTRUCCIONES DE USO

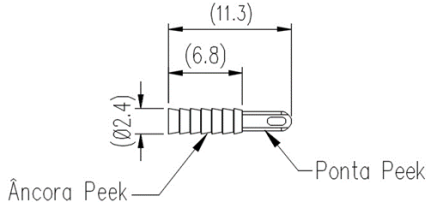
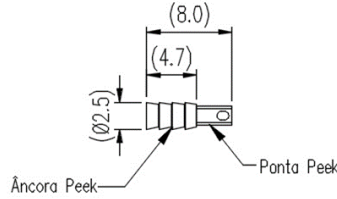
Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

6 de 29

### ANCLAS PRESSLOCK

|                             |                                                                                                                   |                                                                                       |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>320-24113</b>            | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO                                        |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-24113-1-BA</b>       | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON HILO # 1 BLANCO Y AZUL           |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-1-BP</b>       | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON F10 # 1 BLANCO Y NEGRO           |                                                                                       |                       |
| <b>320-2468113-PKSF</b>     | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO                                      |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-2BAPK-HIP</b>  | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON HILO # 2 AZUL Y BLANCO     |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-2BPPK-HIP</b>  | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON HILO # 2 NEGRO Y BLANCO    |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-13BAPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y AZUL  |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-13BPPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y NEGRA |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-16BAPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm AZUL Y BLANCA  |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-16VBPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm VERDE Y BLANCA |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-16BPPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm BLANCA Y NEGRA |                                                                                       |                       |
| <b>320-24113-SFPK-HIP</b>   | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x6.8/11.3mm DE OJAL CERRADO                                |                                                                                       |                       |
| <b>320-25080</b>            | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO                                         |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |

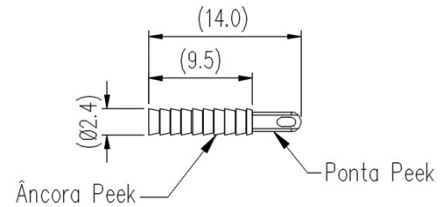
## INSTRUCCIONES DE USO

Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

7 de 29

|                          |                                                                                                             |                                                                                     |                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>320-24140</b>         | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø2.4x9.5/14.0mm DE OJAL CERRADO                                  |  | <p>PEEK<br/>ASTM<br/>F2026</p> |
| <b>320-24140-1-BA</b>    | PRESSLOCK ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x9.5/14,0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #1 BLANCO Y AZUL        |                                                                                     |                                |
| <b>320-24140-1-BP</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x9.5/14.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #1 BLANCO Y NEGRO     |                                                                                     |                                |
| <b>320-24140-2-BA</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x9.5/14.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO      |                                                                                     |                                |
| <b>320-24140-2-BP</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x9.5/14.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y NEGRO     |                                                                                     |                                |
| <b>320-24140-FT16-BA</b> | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x9.5/14.0mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm AZUL Y BLANCA  |                                                                                     |                                |
| <b>320-24140-FT16-BP</b> | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x9.5/14.0mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm BLANCA Y NEGRA |                                                                                     |                                |
| <b>320-24140-FT16-VB</b> | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x9.5/14.0mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm VERDE Y BLANCA |                                                                                     |                                |
| <b>320-2495140-PKSF</b>  | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.4x9.5/14.0mm DE OJAL CERRADO                                |                                                                                     |                                |

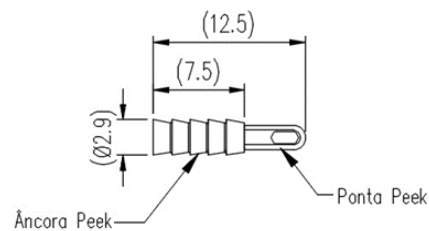
## INSTRUCCIONES DE USO

Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

8 de 29

|                             |                                                                                                                   |                                                                                     |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>320-29125</b>            | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO                                        |  | <p>PEEK<br/>ASTM<br/>F2026</p> |
| <b>320-29125-BA-2</b>       | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO            |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-BP-2</b>       | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 NEGRO Y BLANCO           |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-FTBA-13</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y AZUL        |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-FTBP-13</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y NEGRA       |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-FTAB-16</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm AZUL Y BLANCA        |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-FTBP-16</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm BLANCA Y NEGRA       |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-FTVB-16</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm VERDE Y BLANCA       |                                                                                     |                                |
| <b>320-2975125-PSKF</b>     | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO                                      |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-2BAPK-HIP</b>  | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO # 2 AZUL Y BLANCO     |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-2BPPK-HIP</b>  | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO # 2 BLANCO Y NEGRO    |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-13BAPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y AZUL  |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-13BPPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y NEGRA |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-16BAPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm AZUL Y BLANCA  |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-16VBPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm VERDE Y BLANCA |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-16BPPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm BLANCA Y NEGRA   |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-20BAPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 2,0mm AZUL Y BLANCA  |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-20BPPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 2,0mm NEGRO Y BLANCA |                                                                                     |                                |
| <b>320-29125-SFPK-HIP</b>   | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x7.5/12.5mm DE OJAL CERRADO                                |                                                                                     |                                |

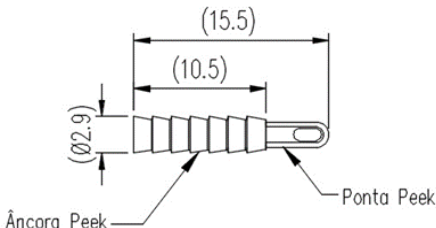
## INSTRUCCIONES DE USO

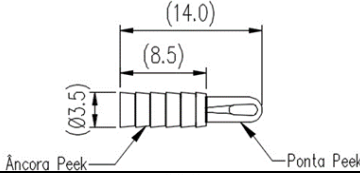
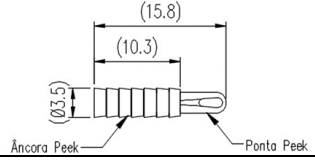
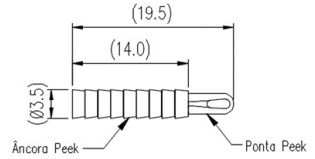
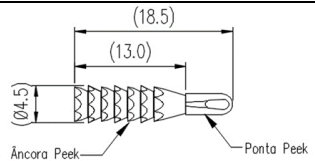
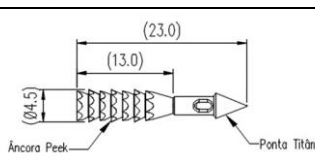
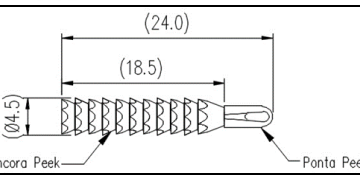
### Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

9 de 29

|                             |                                                                                                                     |                                                                                      |                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>320-29155</b>            | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO                                         |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026 |
| <b>320-29155-1-BA</b>       | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO #1 BLANCO Y AZUL             |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-1-BP</b>       | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO #1 BLANCO Y NEGRO            |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-BA</b>         | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO Y AZUL             |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-BP</b>         | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 NEGRO Y BLANCO            |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-B</b>          | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2 BLANCO                    |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-BA-FT13</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA BLANCA Y AZUL 1,3mm         |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-BP-FT13</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA BLANCA Y NEGRA 1,3mm        |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-BA-FT16</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA BLANCA Y AZUL 1,6mm         |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-BP-FT16</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA BLANCA Y NEGRA 1,6mm        |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-VB-FT16</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA 2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA VERDE Y BLANCA 1,6mm         |                                                                                      |                       |
| <b>320-29105155-PKSF</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO                                       |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-2BAPK-HIP</b>  | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO # 2 AZUL Y BLANCO      |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-2BPPK-HIP</b>  | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON HILO # 2 NEGRO Y BLANCO     |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-13BAPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA # 1,3mm BLANCA Y AZUL |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-13BPPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y NEGRA  |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-16BAPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm AZUL Y BLANCA   |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-16VBPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm VERDE Y BLANCA  |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-16BPPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,6mm BLANCA Y NEGRA  |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-20BAPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 2.0mm AZUL Y BLANCA   |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-20BPPK-HIP</b> | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 2.0mm NEGRA Y BLANCA  |                                                                                      |                       |
| <b>320-29155-SFPK-HIP</b>   | PRESSLOCK LARGA - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.9x10.5/15.5mm DE OJAL CERRADO                                 |                                                                                      |                       |

|                     |                                                                             |                                                                                       |                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>320-35140</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø3.5x8.5/14.0mm DE OJAL CERRADO  |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026                                      |
| <b>320-35158</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø3.5x10.3/15.8mm DE OJAL CERRADO |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026                                      |
| <b>320-35195</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø3.5x14.0/19.5mm DE OJAL CERRADO |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026                                      |
| <b>320-45185</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø4.5x13.0/18.5mm DE OJAL CERRADO |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026                                      |
| <b>320-45185-TI</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø4.5x13.0/23.0mm PUNTA BALA TI   |   | PEEK<br>ASTM<br>F2026 /<br>Titanio<br>Ti6Al4V<br>ASTM F136 |
| <b>320-45240</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø4.5x18.5/24.0mm DE OJAL CERRADO |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026                                      |

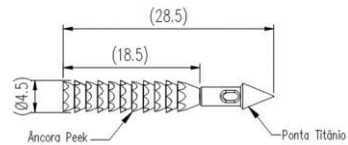
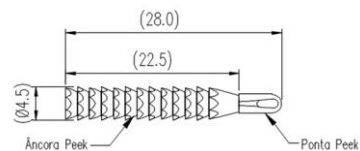
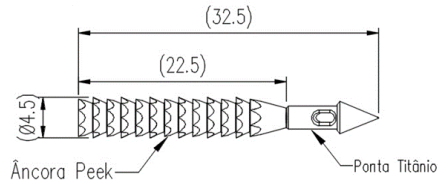
## INSTRUCCIONES DE USO

Ancla en PEEK con Insensor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

11 de 29

|                     |                                                                             |                                                                                       |                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>320-45240-TI</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø4.5x18.5/28.5mm PUNTA BALATI    |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026 /<br>Titanio<br>Ti6Al4V<br>ASTM F136 |
| <b>320-45280</b>    | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø4.5x22.5/28.0mm DE OJAL CERRADO |    | PEEK<br>ASTM<br>F2026                                      |
| <b>320-45280-TI</b> | ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA PRESSLOCK Ø4.5x22.5/32.5mm PUNTA BALATI    |  | PEEK<br>ASTM<br>F2026 /<br>Titanio<br>Ti6Al4V<br>ASTM F136 |

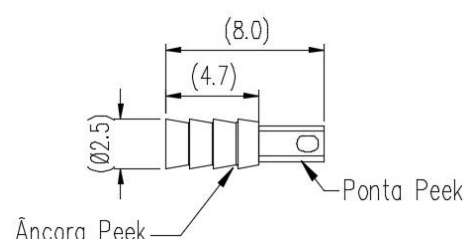
## INSTRUCCIONES DE USO

Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

12 de 29

|                          |                                                                                                           |                                                                                     |                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>320-25080-AB-0</b>    | PRESSLOCK ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #0 AZUL Y BLANCO       |  | <p>PEEK<br/>ASTM<br/>F2026</p> |
| <b>320-25080-B-0</b>     | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #0 BLANCO            |                                                                                     |                                |
| <b>320-25080-BA-1</b>    | PRESSLOCK ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #1 BLANCO Y AZUL       |                                                                                     |                                |
| <b>320-25080-BP-1</b>    | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #1 BLANCO Y NEGRO    |                                                                                     |                                |
| <b>320-25080-AB-2-0</b>  | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2-0 AZUL Y BLANCO   |                                                                                     |                                |
| <b>320-25080-B-2-0</b>   | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO CON HILO #2-0 BLANCO          |                                                                                     |                                |
| <b>320-25080-FTBA-13</b> | PRESSLOCK - ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8 0mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y AZUL |                                                                                     |                                |
| <b>320-25080-FTBP-13</b> | PRESSLOCK ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO CON CINTA 1,3mm BLANCA Y NEGRA  |                                                                                     |                                |
| <b>320-254780-PKSF</b>   | PRESSLOCK ANCLA EN PEEK SIN NUDO IMPACTADA Ø2.5x4.7/8.0mm DE OJAL CERRADO                                 |                                                                                     |                                |

## INSTRUCCIONES DE USO

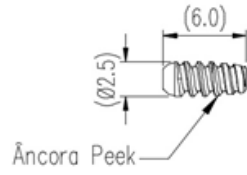
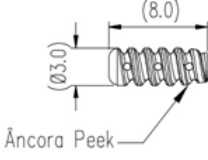
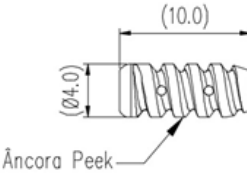
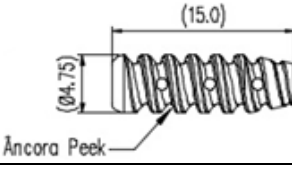
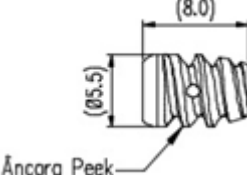
Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

13 de 29

### ANCLAS TENOLOCK

|                     |                                                                                                              |                                                                                       |                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>320-25080-FT</b> | TENOLOCK -ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø2.5x6.0mm                                             |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-30080-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø3.0x8.0mm                                            |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-40010-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø4.0x10.0mm                                           |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-4010-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø4.0x10.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2-0 AZUL Y BLANCO |                                                                                       |                 |
| <b>320-47515-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø4.75x15.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO  |   | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-5580-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø5.5x8.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 BLANCO Y AZUL    |  | PEEK ASTM F2026 |

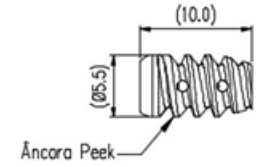
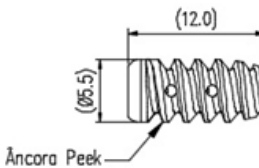
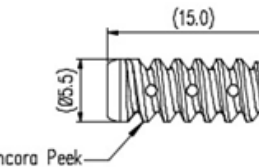
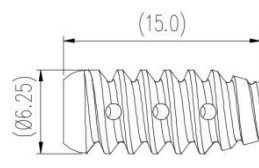
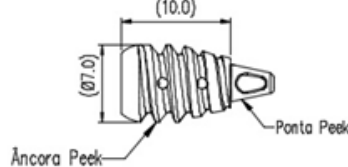
## INSTRUCCIONES DE USO

### Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

14 de 29

|                     |                                                                                                                       |                                                                                       |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>320-5510-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø5.5x10.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO            |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-5512-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø5.5x12.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO            |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-5515-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø5.5x15.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO            |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-62515-FT</b> | TENOLOCK ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø6.25x15.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO             |   | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-70141-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø7.0x10.0mm SIN NUDO DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |  | PEEK ASTM F2026 |

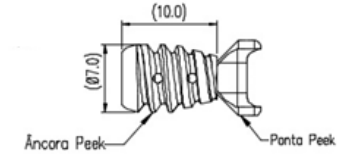
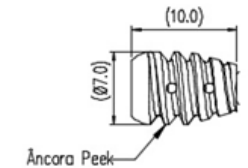
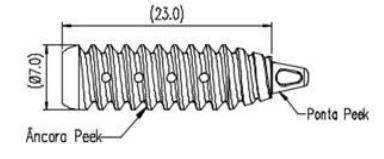
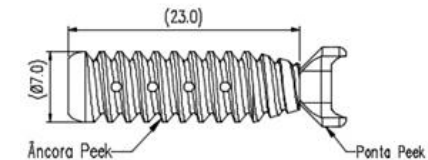
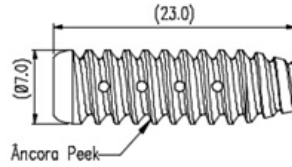
## INSTRUCCIONES DE USO

Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

15 de 29

|                     |                                                                                                                       |                                                                                       |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>320-70146-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø7.0x10.0mm SIN NUDO DE OJAL ABIERTO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-7010-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø7.0x10.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO            |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-70271-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø7.0x23.0mm SIN NUDO DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-70276-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø7.0x23.0mm SIN NUDO DE OJAL ABIERTO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |   | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-7023-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø7.0x23.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO            |  | PEEK ASTM F2026 |

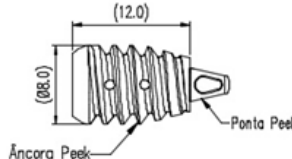
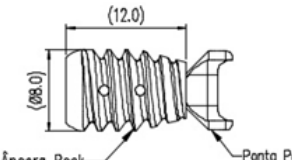
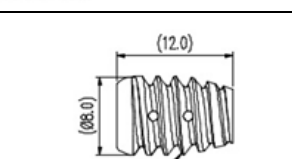
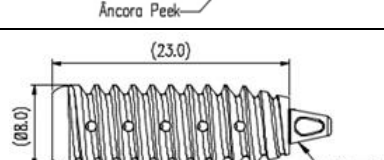
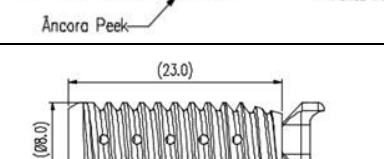
## INSTRUCCIONES DE USO

### Ancla en PEEK con Inersor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

16 de 29

|                     |                                                                                                                       |                                                                                       |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>320-80161-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø8.0x12.0mm SIN NUDO DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-80166-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø8.0x12.0mm SIN NUDO DE OJAL ABIERTO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-8012-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø8.0x12.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO            |    | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-80271-FT</b> | TENOLOCK ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø8.0x23.0mm SIN NUDO DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO   |   | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-80276-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø8.0x23.0mm SIN NUDO DE OJAL ABIERTO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |  | PEEK ASTM F2026 |

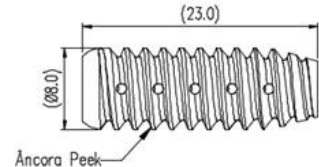
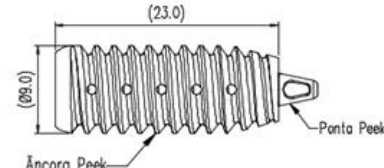
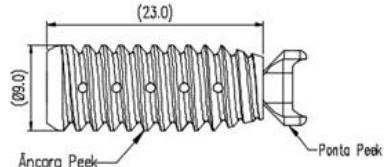
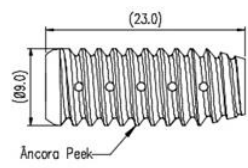
## INSTRUCCIONES DE USO

### Ancla en PEEK con Insensor - GMReis

IMP ANCPK (ESP)

Hoja:

17 de 29

|                     |                                                                                                                       |                                                                                      |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>320-8023-FT</b>  | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø8.0x23.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO            |   | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-90271-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø9.0x23.0mm SIN NUDO DE OJAL CERRADO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |   | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-90276-FT</b> | TENOLOCK - ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø9.0x23.0mm SIN NUDO DE OJAL ABIERTO CON HILO #2 AZUL Y BLANCO |   | PEEK ASTM F2026 |
| <b>320-9023-FT</b>  | TENOLOCK ANCLA EN PEEK PARA BIOTENODESIS CON INSEROR Ø9.0x23.0mm SIN NUDO CON HILO LOOP #2 AZUL Y BLANCO              |  | PEEK ASTM F2026 |

|                                                                                   |                                                                        |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  | <b>INSTRUCCIONES DE USO</b><br><br>Ancora en PEEK con Inersor - GMReis |  | IMP ANCPK (ESP)<br><br>Hoja: 18 de 29 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|

### 3.1.1.d. Descripción del principio físico y fundamentos de la tecnología del producto aplicados para su funcionamiento, su acción y función

El producto posibilita la reinserción de un tejido blando al hueso esponjoso, promoviendo su estabilización y regeneración. Para eso, se enrosca una ancla en el hueso, y los hilos de sutura prendidos a esta ancla se atan en el tejido de tal forma a llevar a la regeneración tejidual.

### 3.1.1.e. Componentes auxiliares necesarios para la implantación del producto

No hay componentes auxiliares.

### 3.1.1.f. Composición

#### 3.1.1.f.1. Composición del material implantable

El cuerpo de la ancla y las puntas se fabricarán a partir de barras redondas del polímero PEEK (Poli-éter-éter-cetona), conforme la norma *ASTM F2026 - Standard Specification for Polyetheretherketone (PEEK) Polymers for Surgical Implant Application*.

Angunos modelos de puntas (ver tabla 3.1.1.c.) se fabricarán con aleación de Titanio, Ti6Al4V de acuerdo con la norma *ASTM F136 - Standard Specification Wrought Titanium-6Aluminium-4Vanadium Alloy (Extra Low Interstitial) for Surgical Implant Applications*, adquirida en la forma de barra recocida.

#### 3.1.1.f.2. Composición del inersor

Los materiales utilizados para la fabricación de los componentes no implantables (Inersores) que se utilizan para la inserción de las anclas son:

**Acero 316L**, de acuerdo con la norma *ASTM F899 - clase 3 - Standard Specification for Stainless Steels for Surgical Instruments*.

El material se adquiere en forma de barras canuladas sin costura, recocido.

**Poliacetal**, de acuerdo con *ASTM F1855 - Standard Specification for Polyoxymethylene (Acetal) for Medical Applications*.

#### 3.1.1.f.3. Composición del hilo de sutura

El hilo de sutura utilizado para el montaje del producto es de UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), tranzado, no absorbible, tamaños USP, de acuerdo con la tabla 3.1.1.c. El hilo sigue las especificaciones de la norma *ABNT NBR 13904 - Fios para Sutura Cirúrgica*.

#### 3.1.1.f.4. Composición de la cinta de sutura

La cinta de sutura utilizada para la montaje del producto es de UHMWPE (polietileno de ultra-alto peso molecular), tranzado, no absorbible e de ancho de 2,0mm. La cinta sigue las especificaciones de la norma *ABNT NBR 13904 - Fios para Sutura Cirúrgica*.

#### 3.1.1.f.5. Composición de la aguja crimpada al hilo de sutura

La aguja se fabrica en acero inoxidable tipo 302 (AISI 302) de acuerdo con la norma *ASTM F899 - Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments*, adquiriéndose de un proveedor cualificado, de acuerdo con el sistema de gestión de la calidad de GMReis.

### 3.1.1.g. Marca

Los productos se marcan a láser de acuerdo con la instrucción de trabajo del sistema de calidad de GMReis, y de acuerdo con la norma *ABNT NBR 15165 - Implantes para cirugía - Requisitos generales para marcado, embalaje y rotulación*. Se graban las siguientes informaciones:

- Lote del producto
- Código del producto

|                                                                                   |                                                                        |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  | <b>INSTRUCCIONES DE USO</b><br><br>Ancora en PEEK con Inersor - GMReis |  | IMP ANCPK (ESP)<br><br>Hoja: 19 de 29 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|

- Logotipo de la marca GMReis
- Tamaño

### 3.1.1.h. Procedimiento de trazabilidad del producto

La identificación y trazabilidad del producto se aseguran a través de un conjunto de 05 etiquetas adhesivas suministradas en el embalaje (ver la ilustración siguiente), junto con la Instrucción de Uso y el implante, trayendo informaciones sobre el producto, como: nombre, modelo, código, lote, registro del producto e identificación del fabricante. De esta forma es posible hacer el camino reverso y obtener la producción, materia prima, proveedores y demás ítems de control de calidad establecidos en el Sistema de Calidad de GMReis. Las etiquetas de trazabilidad se deben fijar en los siguientes lugares:

- la etiqueta número 1, obligatoriamente, en el prontuario clínico del paciente;
- la etiqueta número 2, en el laudo entregado al paciente;
- la etiqueta número 3, en la documentación fiscal que genera el cobro a la fuente pagadora;
- la etiqueta número 4, disponible para el control del proveedor (registro histórico de distribución);
- la etiqueta número 5, disponible para el control del cirujano.

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <small> AUT. MS: 1.02.477.0<br/> CNPJ: 60.040.599/0001-19<br/> I.E.: 244.342.283.119<br/> Razão Social: G.M. dos Reis Ind. e Com. Ltda<br/> Av. Pierre Simon de Laplace, 600, Lote 3 Quadra F<br/> CEP: 13069-320 - Campinas/SP - Condomínio Techno Park<br/> Telefone: +55 19 3765-9900<br/> E-mail: sac@gmreis.com.br </small> |
| <b>Afixe nos Prontuários / Attach to the Records</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <small>NOME TÉCNICO / TECHNICAL NAME:</small>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <small>NOME COMERCIAL / COMMERCIAL NAME:</small>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <small>Modelo / Model:</small>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <small>Código / Code:<br/>Lote / Batch:</small>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <small>REGISTRO ANVISA Nº:<br/>Resp. Técn. Legalmente Habilitado: Geraldo M. dos Reis Jr.<br/>CREA/SP : 0682127536</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Figura:** Etiqueta de rastreabilidad.

Es responsabilidad del equipo médico y del hospital (los depositarios de las informaciones y prontuarios del paciente) la fijación de la etiqueta en la hoja de descripción de la cirugía o sección del prontuario médico. GMReis recomienda que el paciente sea depositario de esta información, recibiendo un certificado con la fijación de una de las etiquetas adhesivas de trazabilidad.

### 3.1.1.1 Forma de presentación

El producto se comercializará en la forma individual, de uso único, estéril y presentado en 4 niveles de embalaje, descritos a continuación.

El producto ancla en PEEK montado en el inersor con los hilos de sutura o 1 cinta de sutura y aguja está acondicionado en un embalaje tipo blíster, constituyendo el embalaje primario. El embalaje primario está acondicionado en papel grado quirúrgico, con rótulo y un Indicador Sensitivo de Esterilización por ETO, constituyendo el embalaje secundario. El producto se acondiciona entonces en una caja de papel, plastificada, impresa, que recibe un sello con un Indicador Sensitivo de Esterilización por ETO, rótulo y lacre adhesivo de seguridad, constituyendo el embalaje terciario. Finalmente, la caja de papel se envuelve con película poliolefínica, termoencogible, constituyendo el embalaje cuaternario del producto. Acompañan el producto: 5 etiquetas de trazabilidad y un manual de como el usuario puede obtener las Instrucciones de Uso del producto, por medio del

|                                                                                   |                                                                        |       |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--|
|  | <b>INSTRUCCIONES DE USO</b><br><br>Ancora en PEEK con Inersor - GMReis |       | IMP ANCPK (ESP) |  |
|                                                                                   |                                                                        | Hoja: | 20 de 29        |  |

formato no impreso, sin costo adicional, incluso de envío. Esas informaciones están compatibilizadas en la rotulación del producto.

Los productos se suministran estériles, esterilizados por óxido de etileno, de acuerdo con *ISO 11135 - Sterilization of health-care products - Ethylene oxide – Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*, y se debe mantener en su embalaje original hasta el momento del uso.



**Figura: Embalaje primario** - embalaje tipo blíster, en PET termosellado en Tyvek® que se acondicionará en embalaje secundario, papel grado quirúrgico, y posteriormente en embalaje terciario, caja de papel plastificada y impresa, envuelta con película poliolefínica (embalaje cuaternario).



**Figura: Embalaje secundario** - embalaje papel grado quirúrgico, posteriormente acondicionado en caja de papel plastificada e impresa (embalaje terciario), envuelta con película poliolefínica (embalaje cuaternario).

|                                                                                   |                                                                                                                                       |       |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTRUCCIONES DE USO</b></p> <p style="text-align: center;">Ancora en PEEK con Inersor - GMReis</p> |       | <p style="text-align: center;">IMP ANCPK (ESP)</p> |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                       | Hoja: | 21 de 29                                           |  |

| PORTUGUES (PT)                                                                                                                                                                                                                                                | ENGLISH (EN)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESPAÑOL (ES)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A Instrução de Uso para este produto está disponível no website <a href="http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU">www.gmreis.com.br/produtos/IFU</a>, (formato não impresso) e sempre estará de acordo com a última versão vigente, aprovada pela Anvisa</p> | <p>The Instruction for USE (IFU) for this product is available on the website: <a href="http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU">www.gmreis.com.br/produtos/IFU</a> (printed format) and will always be in accordance with the latest version, approved by Anvisa</p>                | <p>La Instrucción de Uso para este producto está disponible en el sitio web: <a href="http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU">www.gmreis.com.br/produtos/IFU</a> (formato impreso) y siempre será con arreglo a la última versión en vigor, aprobado por la Anvisa</p> |                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>No campo de busca, procure pelo nº do Registro da Anvisa do Produto ou nome comercial, descrito no rótulo, na embalagem do produto.<br/>Para visualização do documento é preciso ter o Adobe Reader. Obtenha gratuitamente no website acima.</p>           | <p>In the search field, look for ANVISA registration number or commercial name, described on label in the product packaging. In order to view the document, you must have Adobe Reader, which can be downloaded <a href="http://for.free">for free</a> from the website above.</p> | <p>En el campo de búsqueda, busque por el número Registro ANVISA del producto o nombre comercial, descrito en la etiqueta del envase de producto. Para visualizar el documento es necesario tener el Adobe Reader. Reciba gratis en el sitio web arriba.</p>          |                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Caso necessite receber uma versão impressa da IU, sem custo adicional, inclusive de envio, solicite gratuitamente pelo e-mail: <a href="mailto:sac@gmreis.com.br">sac@gmreis.com.br</a> ou telefone disponível na rotulagem</p>                            | <p>If you need a printed copy at no extra cost, including shipping, please contact the e-mail: <a href="mailto:sac@gmreis.com.br">sac@gmreis.com.br</a> or phone number available on labelling</p>                                                                                 | <p>Caso necesite recibir una versión impresa de IFU, sin costo adicional, incluyendo el envío, solicite gratis por el correo electrónico: <a href="mailto:sac@gmreis.com.br">sac@gmreis.com.br</a> o teléfono disponible en el etiquetad</p>                          | <p>PT - Guia para acesso das Instruções de Uso GMReis (IFU)</p> <p>EN - GMReis Instructions for Use (IFU) access guide</p> <p>ES - Guía para acceder a las instrucciones de uso (IFU)</p> <p>IFUGMREIS – Rev.01</p> |

**Figura:** Manual que acompanha el producto.

Los modelos suministrados están descriptos en ítem 3.1.1.c. desta Instrucción de Uso.

### 3.1.2. Manipulación, conservación, almacenamiento, transporte y riesgos asociados

El hospital es responsable por las etapas de manoseo, conservación y almacenamiento de los productos a partir del recibimiento, debiendo garantizar que se respetarán las recomendaciones del fabricante y que el producto mantendrá las características originales establecidas.

El producto se debe conservar, manipular y transportar de tal forma a impedir cualquier daño o modificación a sus características y embalaje.

El producto médico debe manipularse con cuidado, a fin de evitar golpes bruscos, caídas y otros riesgos y/o imperfecciones que afecten a su calidad y también la seguridad del usuario.

El producto se debe conservar y almacenar en su embalaje original hasta el momento del uso, con los debidos cuidados del área médico hospitalaria, en ambiente limpio, seco, ventilado, protegido de la luz solar y libre de sustancias contaminantes (vapores ácidos y orgánicos), y con controles, recomendables, de temperatura ( $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ) y humedad ( $\leq 70\%$  UR).

El manoseo del producto lo deben hacer exclusivamente profesionales del área médico hospitalaria, debidamente capacitados, habilitados y familiarizados con la técnica y los procedimientos abarcados.

Los efectos de vibración, choques, asentamiento defectuoso y apilados inadecuados durante el transporte se deben evitar.

El almacenamiento fuera de esas condiciones puede generar riesgos al procedimiento, y al paciente.

### 3.1.3. Instrucción para el uso e indicación de capacitación

#### 3.1.3.1. Instrucción para el uso

- 1- Realizar evaluación por imagen y clínica.
- 2- Seleccionar el modelo y tamaño del producto más apropiado.
- 3- Realizar la perforación con la broca; para las anclas roscadas utilizar el macho correspondiente; para las anclas impactadas utilizar la punción correspondiente.
- 4- Insertar cuidadosamente el ancla.
- 5- Verificar su posicionamiento después de la implantación.
- 6- Realizar el tensionamiento, si es necesario.
- 7- Suturar y cerrar el acceso.

|                                                                                   |                                                                        |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  | <b>INSTRUCCIONES DE USO</b><br><br>Ancora en PEEK con Inersor - GMReis |  | IMP ANCPK (ESP)<br><br>Hoja: 22 de 29 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|

### 3.1.3.2. Indicación de capacitación

Solamente cirujanos ortopedistas habilitados y capacitados en reconstrucción ligamental podrán utilizar el producto.

### 3.1.4. Precauciones, restricciones, advertencias, cuidados especiales, aclaración sobre el uso del producto, almacenamiento, manejo y transporte

#### 3.1.4.a. Informaciones Generales

Los productos se suministran estériles, por óxido de etileno, de acuerdo con *ISO 11135 - Sterilization of health-care products - Ethylene oxide – Requirements for the development, validation and routine control of the sterilization process for medical devices*, y se debe mantener en su embalaje original hasta el momento de su uso.

#### 3.1.4.b. Instrucciones para el paciente

El paciente debe ser advertido por el cirujano responsable sobre los límites de sus actividades iniciales y sobre su rehabilitación a fin de proteger la cirugía realizada.

Actividades excesivas iniciales pueden afectar el posicionamiento del componente implantable o entonces afectar la estructura ósea y/o ligamental de apoyo, haciendo con que el procedimiento de revisión sea más difícil y precoz.

Se deberá advertir al paciente sobre los riesgos de la cirugía y sobre los efectos secundarios o colaterales indeseables, y que la reconstrucción realizada con el implante no presentará las mismas características físicas que el tejido natural, pudiendo haber fallas del componente implantable, resultante de actividades físicas anormales, traumas o referente a enfermedades degenerativas.

El cirujano responsable debe orientar al paciente a utilizar soporte externo adecuado, en caso que sea necesario, por el tiempo estipulado por el cirujano responsable, así como restringir las actividades físicas que coloquen en riesgo el implante o que permitan movimientos en el lugar donde se hizo la implantación.

Es importante que el paciente tenga conocimiento de que el implante tiene una vida útil de 90 (noventa) días, y deberá ser advertido de que, en caso que no suceda la reconstrucción ligamental en ese período, los implantes podrán sufrir soltura, ruptura o quiebra, principalmente si no sigue las recomendaciones post operatoria, hay exceso de carga en la fisioterapia y/o mal posicionamiento del implante, accidentes, así como otras causas.

Pacientes tabaquistas, diabéticos, con disfunciones metabólicas y/o que hacen uso de esteroides anabolizantes, o que están haciendo uso de algún medicamento y/o que presentan otras enfermedades que pueden alterar la reconstrucción ligamental, deberán tener conocimiento de que después del plazo de 90 días los implantes podrán sufrir soltura o ruptura, y que podrá ser necesaria una segunda cirugía para reparar los efectos secundarios. En caso que el paciente se accidente, él debe ser orientado de que el implante se puede romper, soltar y/o migrar, y deberá recurrir a su médico.

Es responsabilidad del cirujano responsable hacer las recomendaciones post operatorias, seguimientos, evolución clínica y radiológica del paciente.

Es importante que el paciente esté consciente de que la inobservancia de las recomendaciones post operatorias podrá llevar al no éxito del tratamiento y que el implante podrá sufrir migración, soltura y/o quiebra.

Se debe informar al paciente de que, aunque las materias primas utilizadas para la fabricación del implante sean reconocidamente biocompatibles, pueden suceder otros efectos secundarios o reacciones adversas.

#### 3.1.4.c. Esterilidad

Los productos se suministrarán esterilizados por óxido de etileno, y se deberán mantener en su embalaje original hasta el momento del uso, siguiendo los procedimientos de asepsia médica hospitalaria. El producto es de uso único, y no se deberá reesterilizar, pues eso acarrea riesgo de

|                                                                                   |                                                                        |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  | <b>INSTRUCCIONES DE USO</b><br><br>Ancora en PEEK con Inersor - GMReis |  | IMP ANCPK (ESP)<br><br>Hoja: 23 de 29 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|

pérdida de sus características fisicoquímicas y mecánicas originales, de tal forma que el producto no presentará el desempeño atribuido para el uso pretendido, pudiendo generar riesgos al paciente.

#### **3.1.4.d. Restricciones de carga del producto**

Estos implantes se proyectan para soportar cargas fisiológicas cuando se implantan para la estabilización de una determinada estructura ligamental, pudiendo romperse mientras no sucede la total integración/regeneración tejidual. Sobrecargas y esfuerzos mecánicos de manipulación (i.e., torsión, flexión, tracción, etc.) ejercidos durante su implantación comprometen sus características mecánicas, pudiendo llevar a la falla precoz del implante, así como la quiebra durante la implantación.

#### **3.1.4.e. Procedimiento en caso de caída del producto**

En caso que el producto sufra una caída, **no** se deberá usar y se deberá inutilizar y desechar de acuerdo con el procedimiento de inutilización y desecho.

#### **3.1.4.f. Procedimiento de inutilización y desecho**

Los implantes que por alguna razón no se utilizaron durante el acto quirúrgico y de los cuales se abrió el embalaje, o sufrieron daños y/o caídas no se pueden reutilizar y/o reesterilizar, debiéndose desechar en el propio hospital de acuerdo con el procedimiento médico hospitalario y/o legislación local o aún de acuerdo con instrucciones de la Comisión de Control de Infección Hospitalaria - CCIH. Los métodos y procedimientos de desecho del producto médico deben asegurar la completa descaracterización del mismo, impidiendo cualquier posibilidad de su reutilización. La descaracterización del producto médico es total responsabilidad de la institución hospitalaria, así como los métodos y procedimientos de desecho utilizados.

Se recomienda que se deformen con moldeadores o retorcedores hasta que quede claramente identificado que el producto es impropio para uso, asegurando que el producto no se podrá utilizar o reaprovechar indebidamente.

#### **3.1.4.g. Caracterización de los límites de peso**

El uso de los implantes permite que el cirujano especialista haga la fijación ligamental en la posición anatómica correcta. Los implantes permiten una movilidad precoz de los pacientes, pero se deben limitar a movimientos con carga hasta que el cirujano confirme la integración/regeneración ligamental a través de evaluaciones por imagen clínica.

Estos implantes se conciben como auxiliares al proceso natural de integración/regeneración tejidual, pero no sirven para substituir estructuras anatómicas o soportar el peso del cuerpo, mientras no hay integración/regeneración tejidual completa.

Durante la recuperación, el cirujano, junto con el fisioterapeuta, deberá controlar la carga aplicada, aumentando esta carga de acuerdo con la evolución del proceso de regeneración tejidual y del estado general del paciente.

Es muy importante realizar una fijación cuidadosa y adecuada durante el acto quirúrgico de la reconstrucción ligamental para el completo éxito de la regeneración ligamental. Los implantes utilizados en cirugía sirven para promover un proceso normal de integración/regeneración tejidual. Ellos no tienen la función de substituir estructuras anatómicas normales, ni de sostener permanentemente esfuerzos mecánicos provocados por regiones no regeneradas.

No hay datos comprobatorios que limiten el uso de implantes en función del peso del paciente, el cirujano debe orientar al paciente sobre los cuidados que se deben tomar y el soporte físico, es decir, la órtesis adecuada que se debe utilizar durante el tiempo de uso del implante, si se aplica.

#### **3.1.4.h. Límite de conformación**

El producto no se debe conformar en ninguna hipótesis.

#### **3.1.4.i. Necesidad de soporte óseo**

|                                                                                   |                                                                                                                                       |       |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTRUCCIONES DE USO</b></p> <p style="text-align: center;">Ancora en PEEK con Inersor - GMReis</p> |       | <p style="text-align: center;">IMP ANCPK (ESP)</p> |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                       | Hoja: | 24 de 29                                           |  |

Si la reconstrucción ligamental requiere soporte óseo, es responsabilidad del cirujano definir el tipo y la cantidad de injerto óseo que se utilizará.

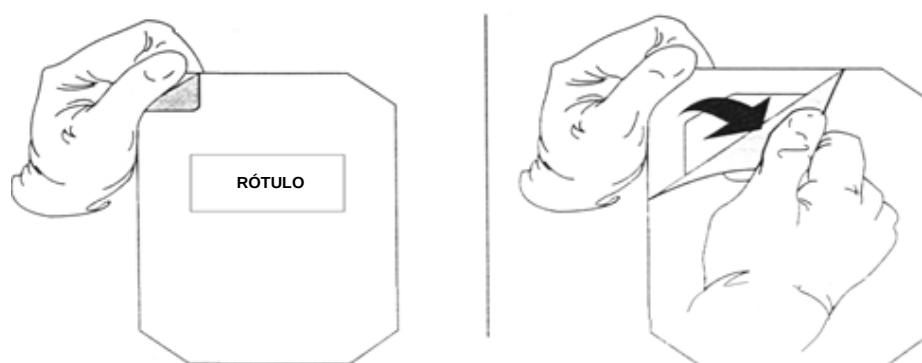
### 3.1.4.j. Procedimiento de abertura del embalaje

#### Procedimiento de abertura de la caja

- 1- Antes de retirar el producto, verifique si el embalaje no está violado o dañado, pues podrá afectar la esterilidad del producto.
- 2- Verifique el plazo de validez y verifique si el modelo seleccionado es el correspondiente al embalaje que se desea abrir.
- 3- Al retirar la película poliolefínica y el lacre de seguridad, abrir la caja y retirar el producto.
- 4- Se deben tomar cuidados especiales en el momento de la abertura para asegurar la integridad aséptica durante la remoción del implante de sus embalajes.

#### Procedimiento de abertura del embalaje blíster

- 5- La abertura del blíster debe seguir las indicaciones de la figura siguiente:



**Figura: Abertura del Blíster.**

- 6- Manos y guantes secos – sólo utilizar guantes libres de polvos.
- 7- Verificar los datos del rótulo fijado en el blíster y verificar si el sello integrador de óxido de etileno (esterilización) se presenta en color verde, indicando que el producto es estéril.
- 8- Sujete el blíster de forma firme.
- 9- Sujete la lengüeta con la otra mano.
- 10- Para abrir el embalaje, tire de la lengüeta con fuerza continua.
- 11- Sujete la punta del blíster de forma firme.
- 12- Con la otra mano, tire de la lengüeta del blíster.
- 13- Después de abrir el blíster externo, repita el procedimiento descrito anteriormente para abrir el blíster interno.

### 3.1.4.l. Factores que pueden hacer con que el implante sufra una posible quiebra, soltura o migración que se deben informar al paciente

A continuación se citan los principales factores que, solos o asociados, pueden hacer con que el implante sufra una falla (quiebra, soltura o migración) precoz:

- inobservancia de las recomendaciones post operatorias;
- disfunciones metabólicas;
- diabetes;
- tabaquismo;
- pacientes que hicieron o hacen uso de esteroides anabolizantes;
- accidente del paciente (ej. caídas, accidentes automovilísticos, etc.);
- falla en la técnica quirúrgica;

- elección inadecuada del implante;
- liberación de carga precoz;
- exceso de carga o actividad fisioterápica inadecuada;
- osteoporosis;
- práctica de actividad física intensa;
- práctica de actividad física antes de la liberación del cirujano;
- inobservancia de las Instrucciones de Uso.

## 3.2. Indicación, finalidad y uso a que se destina el producto

### 3.2.1. Indicación de uso

El producto está indicado para la reinserción de parte blandas en hueso esponjoso en casos de reconstrucción ligamental.

#### 3.2.1.1. Criterios para la selección del producto e indicaciones específicas

La selección correcta del implante es extremadamente importante, debiéndose tomar en cuenta los aspectos biomecánicos y la anatomía de la estructura ósea a tratar, que corresponde al tamaño del implante a seleccionar.

El éxito de la fijación está relacionado a la selección correcta del implante, y la selección del implante es responsabilidad del cirujano.

El cuadro siguiente trae las indicaciones específicas para cada tamaño de ancla:

| Fastlock      |               |        |      |        |      |        |         |         |     |        |                   |
|---------------|---------------|--------|------|--------|------|--------|---------|---------|-----|--------|-------------------|
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Hombro | Mano | Muñeca | Codo | Cadera | Rodilla | Tobillo | Pie | Bíceps | Tendón de Aquiles |
| 2,5           | 3,6           |        | x    |        |      |        |         |         | x   |        |                   |
| 3,5           | 4,0           |        |      |        |      |        |         |         | x   |        |                   |
| 3,5           | 7,8           |        |      |        | x    |        |         | x       | x   |        |                   |
| 3,5           | 10,1 / 15,8   | x      |      |        | x    |        |         | x       | x   |        |                   |
| 4,75          | 15,0          | x      |      |        |      |        | x       | x       | x   |        |                   |
| 5,5           | 15,0          | x      |      |        |      |        | x       | x       |     |        |                   |
| FitPress      |               |        |      |        |      |        |         |         |     |        |                   |
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Hombro | Mano | Muñeca | Codo | Cadera | Rodilla | Tobillo | Pie | Bíceps | Tendón de Aquiles |
| 2,1           | 9,8           |        | x    | x      |      |        |         |         | x   |        |                   |
| 2,6           | 10,6          | x      |      |        |      | x      |         | x       | x   |        |                   |
| Presslock     |               |        |      |        |      |        |         |         |     |        |                   |
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Hombro | Mano | Muñeca | Codo | Cadera | Rodilla | Tobillo | Pie | Bíceps | Tendón de Aquiles |
| 2,4           | Todos         | x      | x    | x      |      | x      |         | x       | x   |        |                   |
| 2,5           | Todos         | x      | x    | x      |      | x      |         | x       | x   |        |                   |
| 2,9           | Todos         | x      |      |        |      | x      |         | x       | x   |        |                   |
| 3,5           | 8,5           |        | x    | x      | x    |        |         |         | x   |        |                   |
| 3,5           | 10,3          |        |      |        | x    |        | x       | x       | x   |        |                   |

| 3,5             | 14,0          | x      |      |        |      |        | x       | x       | x   |        |                   |
|-----------------|---------------|--------|------|--------|------|--------|---------|---------|-----|--------|-------------------|
| 4,5             | 13,0 / 22,5   | x      |      |        |      |        | x       | x       |     |        |                   |
| 4,5             | 18,5          | x      |      |        |      |        | x       | x       |     |        |                   |
| <b>Tenolock</b> |               |        |      |        |      |        |         |         |     |        |                   |
| Diámetro (mm)   | Longitud (mm) | Hombro | Mano | Muñeca | Codo | Cadera | Rodilla | Tobillo | Pie | Bíceps | Tendón de Aquiles |
| 2,5             | 6,0           |        | x    | x      |      |        |         |         | x   |        |                   |
| 3,0             | 8,0           |        | x    | x      |      |        |         |         | x   |        |                   |
| 4,0             | 10,0          |        |      | x      |      |        |         | x       | x   |        |                   |
| 4,75            | 15,0          |        |      |        | x    |        | x       | x       | x   |        |                   |
| 5,5             | Todos         | x      |      |        |      |        |         | x       | x   |        |                   |
| 6,25            | 15,0          | x      |      |        |      |        |         | x       | x   |        |                   |
| 7,0             | Todos         |        |      |        |      |        |         |         |     | x      |                   |
| 8,0             | Todos         |        |      |        |      |        |         |         |     | x      |                   |
| 9,0             | 23,0          |        |      |        |      |        |         |         |     |        | x                 |

Las anclas con punta bala, en casos de sutura sin nudo, se utilizan en huesos osteopénicos. Las otras puntas se utilizan, en casos de sutura sin nudo, en huesos esponjosos normales.

### 3.2.2. Efectos secundarios o colaterales indeseables y contraindicaciones

#### 3.2.2.a. Efectos secundarios o colaterales indeseables

- Sensibilidad al PEEK y/o Titanio o reacción alérgica (e.g.: hinchazón repentina, roja y dolorida).
- Infecciones profundas o superficiales.
- Hídrartrosis (acumulación de líquidos en cavidades articulares).

**Nota:** Pacientes tabaquistas (fumantes), ancianos y que sufren de enfermedad degenerativa o disfunción metabólica tienen más dificultades en conseguir la integración/regeneración tejidual, consecuentemente existe una mayor probabilidad de que suceda la ruptura o soltura de los implantes, y no alcanzar la integración/regeneración tejidual.

#### 3.2.2.b. Contraindicaciones

Los pacientes que presenten algún cuadro clínico descrito a continuación no se deben someter al procedimiento con el uso del producto.

Las contraindicaciones incluyen las relacionadas a continuación, pero no son limitadas a:

- Embarazo.
- Calidad o cantidad ósea insuficiente para recibir el producto.
- Limitaciones en el suministro sanguíneo y/o infecciones previas que puedan retardar la recuperación.
- Pacientes con sepsis activa.
- Pacientes en condiciones que puedan comprometer la fijación del implante, como osteoporosis, osteopenia y condiciones patológicas en tejidos blandos.
- Alergia y/o sensibilidad al PEEK y/o Titanio.
- Pacientes sin condiciones de seguir las recomendaciones post operatorias, incluso aquellos que hacen uso abusivo de drogas, tabaquismo y/o alcohol.
- Pacientes en condiciones físicas inadecuadas para someterse al procedimiento quirúrgico.
- Todos los casos no incluidos en las indicaciones.

|                                                                                   |                                                                        |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  | <b>INSTRUCCIONES DE USO</b><br><br>Ancora en PEEK con Inersor - GMReis |  | IMP ANCPK (ESP)<br><br>Hoja: 27 de 29 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|

### **3.3. Información detallada sobre las características de todas las piezas, accesorios y materiales destinados a ser utilizados con el producto**

#### **3.3.1. Combinaciones admisibles**

No se recomienda la combinación con otros materiales. Es total responsabilidad del cirujano los riesgos inherentes a la combinación con otros materiales.

#### **3.3.2. Instrumentales para la implantación de los componentes implantables**

El sistema de Ancla en PEEK con Inersor se debe implantar con el auxilio de los instrumentales (no objeto de este registro) de la marca GMReis. No utilizar otros instrumentales para la colocación del producto. Los instrumentales se adquieren separados. El uso de otros instrumentales, distintos de la marca GMReis, puede hacer con que el producto falle.

### **3.5. Informaciones útiles para evitar riesgos derivados de la implantación**

#### **3.5.1. Riesgos derivados de la implantación**

Para reducir los riesgos de la implantación del producto se deben seguir las recomendaciones referentes a las indicaciones de uso, contraindicaciones y las informaciones descritas en la Instrucción de Uso.

Instrucciones detalladas sobre el uso y las limitaciones del producto se deben dar al paciente.

Procedimientos preoperatorios y los relacionados a la sala de operación, incluyendo conocimiento de técnicas quirúrgicas, selección apropiada del tamaño del implante e implantación adecuada del implante son consideraciones importantes para tener éxito en la utilización de este dispositivo.

No utilice el producto si la fecha marcada en la etiqueta ha expirado o si el embalaje está dañado.

#### **3.5.2. Evaluación del producto implantado**

Evaluaciones por imágenes radiológicas y/o artroscópica intraoperatoria, y evaluación clínica, después de la implantación para la verificación del posicionamiento se recomienda cuando el cirujano cree que es necesario. El cirujano deberá efectuar evaluaciones de seguimiento con la frecuencia que él defina. Si se constata el posicionamiento impropio del implante o otro hecho relevante para el éxito de la reconstrucción ligamental, el cirujano es el responsable por decidir qué acción correctiva se debe tomar.

### **3.6. Características asociadas a la integridad del empaque, forma de manipular el producto y abrir los paquetes para asegurar la esterilidad**

#### **3.6.1. Restricciones e instrucción sobre daños al embalaje**

- Lacre de seguridad del embalaje si está violado.
- Cualquiera de los embalajes presentan daño físico.
- El rótulo o código de identificación está ilegible.
- Fecha de validez está vencida.

En estas circunstancias, el producto se debe inutilizar y desechar de acuerdo con el procedimiento de inutilización y desecho

#### **3.6.2. Restricciones con relación al reprocesamiento**

No está permitido el reprocesamiento del producto, aunque él aparente que está en perfecto estado, pues el producto podrá perder sus propiedades físicas y mecánicas, sin que presente el desempeño previsto para el uso pretendido, pudiendo colocar en riesgo la salud de los pacientes y de los profesionales de los establecimientos de salud.

### **3.8. / 3.9. Información adicional sobre el procedimiento antes de usar el producto**

Los productos se suministran estériles, por óxido de etileno, de acuerdo con *ISO 11135 - Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of the sterilization process for medical devices*, y se debe mantener en su embalaje original hasta el momento de su uso.

### 3.14. Orientaciones específicas al médico referente al relato de eventos adversos

En caso que el producto presente eventos adversos que no estén relatados en la Instrucción de Uso o tenga quejas técnicas sobre el producto, el médico deberá entrar inmediatamente en contacto con el fabricante a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC) de GMReis, además de notificar a la autoridad sanitaria competente.

Para asegurar la trazabilidad del producto, el médico deberá proseguir de acuerdo con el "Procedimiento de trazabilidad del producto". La trazabilidad del producto se asegura a través de las 05 etiquetas de trazabilidad, suministradas dentro del embalaje, junto con la Instrucción de Uso.

### 3.17. Reclamación del cliente

En caso que el producto médico presente un riesgo imprevisible específico, esté fuera de sus especificaciones o esté gerando cualquier insatisfacción, notificar directamente al Servicio de Atención al Cliente (SAC) de GMReis. El producto se deberá enviar limpio y envuelto en bolsa plástica, debidamente identificada y con la descripción de la no conformidad a la siguiente dirección: Av. Pierre Simon De Laplace, 600 - Lote 3, Quadra F, Quarteirão 9677 - Techno Park - CEP 13069-310 - Campinas - SP - Brasil, o notificar directamente al Teléfono: +55 19 3765-9900 / Correo electrónico: [sac@gmreis.com.br](mailto:sac@gmreis.com.br).

### 3.18. Simbología de etiquetado

Los símbolos gráficos utilizados en el etiquetado están de acuerdo con la norma *ABNT NBR ISO 15223* de la siguiente manera:

| SÍMBOLOS                                                                            | DESCRIÇÕES                           | SÍMBOLOS                                                                            | DESCRIÇÕES                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fecha de fabricación                 |  | Producto de un solo uso<br>"No reutilizar"                                                        |
|  | Válido hasta                         |  | No reesterilizar                                                                                  |
|  | No lo use si el embalaje está dañado |  | Tenga cuidado, consulte los documentos adjuntos.<br>"Atención, consulte las instrucciones de uso" |
|  | Fabricante                           |  | Numero de lote                                                                                    |
|  | Esterilizado por óxido de etileno    |  | Mantener alejado del sol                                                                          |

### ALERTA DE USUARIO

Estas Instrucciones de Uso están disponibles en formato no impreso, a través de la dirección electrónica del fabricante: <http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU>, y pueden verificarse en el campo de búsqueda por el nombre comercial descrito en etiqueta del empaque de producto. Las Instrucciones de Uso puestas a disposición estarán siempre de acuerdo con la última versión en

|                                                                                   |                                                                                                              |       |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|
|  | <p align="center"><b>INSTRUCCIONES DE USO</b></p> <p align="center">Ancora en PEEK con Insensor - GMReis</p> |       | <p align="center">IMP ANCPK (ESP)</p> |  |
|                                                                                   |                                                                                                              | Hoja: | 29 de 29                              |  |

vigor. Si el usuario está interesado, las Instrucciones de Uso pueden estar disponibles en formato impreso, sin costo adicional. Solicitud gratuita por correo electrónico: [sac@gmreis.com.br](mailto:sac@gmreis.com.br).

G. M. dos Reis Indústria e Comércio Ltda.  
Avenida Pierre Simon de Laplace, nº 600 - Lote 3 - Quadra F - Quarteirão 9677  
Bairro Techno Park - CEP: 13069-320 - Campinas - SP - Brasil  
Autorização de Funcionamento - AFE nº 1.02.477-0  
CNPJ/MF: 60.040.599/0001-19 / IE: 244.342.283.119  
E-mail: [gmreis@gmreis.com.br](mailto:gmreis@gmreis.com.br)  
Tel.: (0XX19) 3765-9900 / Fax: (0XX19) 3303-9111

---

Geraldo Marins dos Reis Júnior  
CREA-SP nº 0682127536  
GM dos Reis Ind e Com Ltda.  
Responsable Técnico y Legal